

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Όνομασία προϊόντος

Σύριγγες για αρδευτική και τροφή μιας χρήσης

Περιγραφή

Οι σύριγγες για αρδευτική και τροφή μιας χρήσης χρησιμοποιούνται κυρίως για τη τροφή των στόματος τερματικών και έξαψη των χειρουργικών

Υπόδειγμα και κατηγορία

IFS-HH, IFS-PR, IFS-SS

Αρχή λειτουργίας της διάταξης

Οι σύριγγες αρδευτής και τροφοδοσίας χρησιμοποιούν τη "διαφορά υγρής πίεσης" για να ολοκληρώσει τη διατροφή των στόματος τερματικών και έξαψη των χειρουργικών πληγών. Πριν τραβήξει το φάρμακο στο βαρέλι, το πώμα του έμβολου πιέζεται στο πώμα του έμβολου για να εξάτμισε τον αέρα και το φύλλο έχει εισαχθεί στο υγρό φαγητό ή το δοχείο έξαψης φαρμάκου για να σχηματίσει αρνητική πίεση με την τραβήγηση του πώματος του έμβολου, όταν το πώμα του έμβολου σταδιακά τραβήξει προς τα πώμα, η πίεση στο εμπρόσθιο άκρο του πώματος του Υπό την επίδραση της διαφοράς πίεσης, το υγρό φάρμακο εισπνύεται στο βαρέλι της σύριγγας. Μετά την εισαγωγή στο βαρέλι, το θρεπτικό διάλυμα ή το υγρό τροφίμα ενίεται στο ανθρώπινο στόμα με χειροκίνητο βολό ή το στείρο υγρό ξεπλύνσης ενίεται στην ανθρώπινη χειρουργική

Προβλεπόμενο σκοπό

Οι σύριγγες για αρδευτική και τροφή μιας χρήσης χρησιμοποιούνται κυρίως για τη τροφή των στόματος τερματικών και έξαψη των χειρουργικών

1) Προσκοπευμένος χρήστης: Επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό, περιλαμβάνει ιατρούς, νοσοκόμος, θεραπευτής και άλλο σχετικό

2) Προβλεπόμενο πληθυσμό ασθενών

- ηλικία: μη περιορισμένη, περιλαμβάνει νεογενείς έως γηριατρικούς,
- Εύρος βάρους: όλα
- Υγεία: Ασθενείς που χρειάζεται να τροφοδοτούν μέσα από τη στόμη κοιλότητα ή να καθαρίσουν

Ενδείξεις

1. ανοίγει τη συσκευασία μονάδας από το άνοιγμα του σφραγίσματος ή του αποσφραγίσματος και να εξάγει το προϊόν.

2. Αν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με καπάκι του βουνσίου, αφαιρέστε το καπάκι του

3. Τραβήξτε το έμβολο για να αποσπάσετε το υγρό τροφίμο ή το

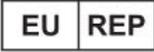
4. Το θρεπτικό διάλυμα ή υγρό τροφίμων ένεεται στο στόμα του ανθρώπου με χειροκίνητο bolus σύμφωνα με την κλινική μέθοδο ένεσης

5. ή το στείρο υγρό ξεπλύνσης ενίεται στην ανθρώπινη χειρουργική τραυματία με χειροκίνητη ένεση σε bolus σύμφωνα με την κλινική

Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις:

1. Πρέπει να είναι στείρο και απαλλαγμένο από πυρογόνο πριν ανοίξει η συσκευασία
2. έχει ισχύουσα περίοδο πέντε ετών, δεν χρησιμοποιείται εάν υπερβαίνει την ημερομηνία ισχύου·
3. Απορρίψτε μετά από εφάπαξ χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία ανοιχθεί ή έχει βλάβη, ή εάν το προστατευτικό καπάκι είναι απαρτάρισμα ή βρέθηκε
5. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο άτομο και το δέρμα πρέπει να αποστειρωθεί σωστά.

«Σύμβολ»

	Παραγωγός		Σήμα CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου
	Εκτελεστός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Μοναδική αναγνώριση συσκευών
	Εισαγωγέας		Κωδικός παρτίδας
	Ιατρικές συσκευές		Ημερομηνία κατασκευής, κατασκευασμένη στην Κίνα
	Προσοχή		Χρήση από
	Συνευμηθείτε οδηγίες χρήσης		Διατηρήστε ξηρά
	Μην επαναχρησιμοποιήσετε		Κρατήστε μακριά Από το ηλιακό φως
	Αστείρωση με χρήση ΕΟ, ενιαία στείρωση συστήματος		Εθάλασσα, χειρώνεται με προσοχή
	Δοκτές μην επαναποστείρωση		Να διατηρήσετε όρθια κατά τη διάρκεια της
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη		Αριθμός καταλόγου
	Περιέχει Latex		Δωρεάν από Latex
	Περιέχει φθαλικό		Απωλείδο φθαλικού
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.		Προστατεύεται από το ηλιακό φως

	Όρια θερμοκρασίας		luftfeuchte begrenzung
---	-------------------	---	------------------------

Αναφορά περιστατικών

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη διάταξη στην Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετά τη χρήση του προϊόντος, η απόρριψη των αποβλήτων ιατρικών συσκευών πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις

Μέθοδος αποθήκευσης και διάρκεια

1. Το προϊόν αυτό ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε σχετικά υγρό λιγότερο από 80%, μη διαβρωτικά αέρια, δροσερό, ξηρό, καλά αεριερωμένο και καθαρό περιβάλλον.

Παραγωγός

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

Διεύθυνση κατασκευής

No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Κίνα
www.easywaycompany.com

Εκτελεστικός αντιπρόσωπος και διεύθυνση

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη)
Eiffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία
Tel: +49- 40- 2513175

Αναθ.: 2.0 Ημερομηνία ισχύος: 8.28.2025