

Instrukcje dotyczące użycia



Nazwa produktu

Jednorazowe strzykawki wodawające i karmienie

Opis

Jednorazowy strzykawki wodawniające i karmienie strzykawki są głównie stosowane do karmienia terminów doustnych oraz

Model i klasy

IFS-HH, IFS-PR, IFS-SS

Zasada działania urządzenia

Strzykawki wodawające i karmiające strzykawki używają „różnicę ciśnienia płyną” do zakończenia karmienia terminów doustnych i Przed wyciągnięciem leku do bółki, korek tłółka jest nacisnąć do dna bółki, aby wyciągnąć powietrz, a dółka włączona do płynnego żywności lub wyciągnąć pojemnik, aby utworzyć negatywne ciśnienie poprzez pociągnięcie tłółka, kiedy stopniowo ciśnienie do góry, ciśnienie na przednim końcu korku tłółka jest mniejsze niż ciśnienie atmosferycznego, a ciśnienie Pod wpływ różnicy ciśnienia leki płynny jest wdechnąć do strzykawki. Po wciągnięciu do beczki roztwór żywności lub płynne jest wstrzyknięcie do ludzkiej usta za pomocą ręcznego bolusu lub sterylizowany płynący do ludzkiej rany chirurgicznej poprzez ręczne

Celem zamierzony

Jednorazowy strzykawki wodawniające i karmienie strzykawki są głównie stosowane do karmienia terminów doustnych oraz

- 1) Użytkownik zamierzony: pracownik medyczny, obejmując lekarzy, pielęgniarki, terapeuta oraz inny odpowiedni pracownik z
- 2) Populacja pacjentów zamierzona
 - Grupa wiekowa: niezograniczone, obejmujące niodoc do starszych;
 - Zagół masy: wszystkie
 - Zdrowia: pacjentów, którzy muszą nakarmić przez jęć ustną lub oczyścić ranę.

Wskazania

1. otworzyć jednostek opakowanie z otwórku rozrwania lub rozpieczenia i wyjąć produkt;
2. Jeśli produkt jest wyposażony kaptywem, usunąć kaptywę.
3. Wciągnąć tłół, aby wssić płyną żywność lub leku wypłynącego.
4. Roztwór żywności lub płynne żywność wstrzyknęła się do ludzkiej usta ręcznym bolusem zgodnie z metodą klinicznego
5. lub sterylizowany płynący jest wstrzyknięty do ludzkiej rany chirurgicznej poprzez ręczne wstrzyknięcie bolusowego zgodnie z metodą

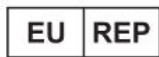
Przeciwwskazania i ostrzeżenia:

1. Przed otwarciem opakowania powinno być sterylizowany i wolny od pyrogenów;
2. Ma okres ważny pięć lat, nie używać jeżeli jest ponad daty ważnej;
3. Wyrzuć po jednorazowym użyciu.

4. Nie stosować, jeśli opakowanie jest otworzone lub uszkodzone, lub jest rozdzielone czynką ochronną lub znalezione obce materiały;

5. Powinna być używane przez specjalne osoby szkolone, a skóra powinna być odpowiednio sterylizowana;

"Symbol"

	Wytwarzec		Znaczy CE i numer identyfikacyjnego organu notyfikowanego
	Zawarżony przedstawiciel w Wspólnocie		Unikalna identyfikacja urządzenia
	Importer		Kod serii
	Urządzenia medyczne		Data produkcji, wyrobione w Chinach
	Ostrożność		Używanie przez
	Konsultujcie z instrukcji dotyczących		Utrzymaj suchy
	Nie powtórzyć ponownie		Trzymaj się z daleka. Z słońca słońca
	Sterylizowana za pomocą EO, jednosterylizowanego systemu		Kruchy, zajmuj się ostrożnie
	Dot nie ponownie sterylizuje		Trzymaj się w wykładzie podczas transportu
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Numer katalogu
	Zawiera Latex		LaTeX bez
	Zawiera ftalat		Wolny ftalat
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Uważnie zastosować instrukcji.		Ochronić przed słońcem
	Limity temperatury		luftfeuchte begrenzung

Zgłaszanie incydentów

Użytkownik i/lub pacjent zgłaszają każdy poważny incydent, który wystąpił związek z urządzeniem Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd oraz właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym jest siedziba użytkownik i/lub

Ochrona środowiska naturalnego

Po użyciu tego produktu usunięcie odpadów z urządzeń medycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymogami ochrony

Metoda przechowywania i okres życia

1. Produkt ten jest ważny przez pięć lat od daty sterylacji.
2. Produkt ten należy chronić przed bezpośrednim słońcem, deszczem i Produkt należy przechowywać w stosunkowo wolnym niż 80%, nieporożylnym gazom, chłodnym, suchym, dobrze wentylacyjnym i czystym środowisku.

Wytwarzec

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

Adres produkcyjnego

No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Chiny

www.easywaycompany.com

Uwierzonym przedstawicielem i adres

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Niemiec

Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 Data skuteczności: 8.28.2025